




Cl Laguna del Marquesado 12 Nave 12 28021 Madrid

Tlf: 91 378 56 04

info@indesasl.es // www.indesasl.es

IDROSTAR

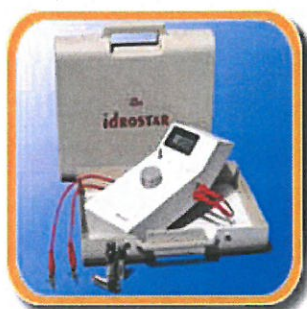

El **IDROSTAR** es una versión simplificada del i2m.a. Se ha diseñado para tener un uso más habitual, fácil de manejar y práctico para el tratamiento.

El generador de Iontoforesis **IDROSTAR** funciona con 4 pilas de 1,5 V (tipo LR6) con una duración de 3 sesiones de tratamiento. El **IDROSTAR** no se enchufa a la corriente por razones evidentes de seguridad (riesgo de tocar el cable con las manos mojadas).

El generador de iontoforesis presenta:

- 1 botón grande, fácil de manejar, que permite ajustar la intensidad de la corriente.
- 1 galvanómetro graduado en decenas de mili-amperios.
- 1 pequeño inversor para cambiar las polaridades después de cada 10 minutos de secuencia.

Esta presentación parecida a la del i2m.a. es muy cómoda para el usuario.



INDICACIONES: Tratamiento de la transpiración excesiva de las manos y pies

CONTRAINDICACIONES: Personas con marcapasos, embarazadas, portadores de material de osteosíntesis.

COMPUESTO POR:

- 1 generador IDROSTAR.
- 2 electrodos inoxidables.
- 2 cables con pinzas de cocodrilo.
- 1 maletín de transporte (bandejas de tratamiento).
- 1 manual.

GARANTÍA: 2 años.