


# IDROSTAR PRO

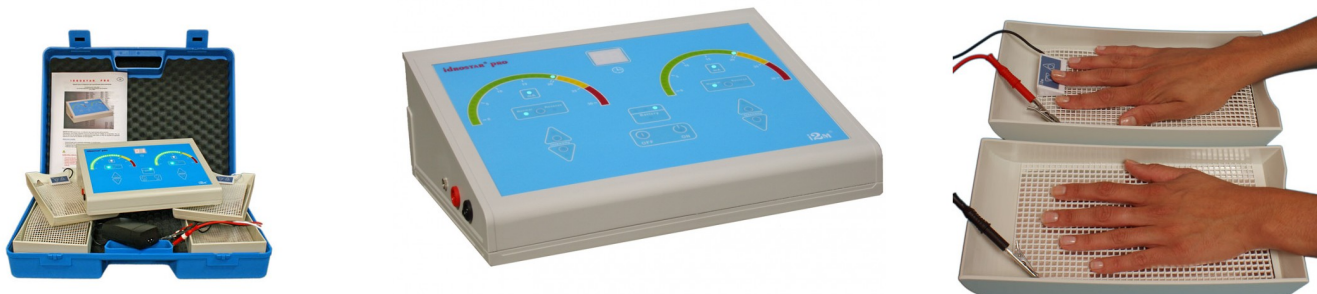

## **IDROSTAR PRO**

IDROSTAR PRO permite tratar las cuatro extremidades simultáneamente, por lo que las sesiones duran la mitad.

La gran originalidad del IDROSTAR PRO está en la gestión del tratamiento en manos con las bandejas. El control independiente permite una autonomía completa durante un tratamiento palmoplantar o palmar. El ahorro de tiempo está optimizado. Este procedimiento permite adaptar la intensidad a su ritmo, variando la corriente sin retirar las manos de las bandejas.

IDROSTAR PRO se controla mediante un microcontrolador. Éste vigila permanentemente la calidad del tratamiento. Cuando se detecta un funcionamiento incorrecto, por ejemplo en caso de mala conexión de los cables o manos o pies incorrectamente posicionados, resulta imposible aumentar la corriente al inicio de la sesión.

IDROSTAR PRO es autónomo. Por razones elementales de seguridad, funciona con batería. Durante las sesiones es independiente de la red.

IDROSTAR PRO viene con su maletín, dos pares de cables, cuatro pinzas cocodrilo inoxidable, dos bandejas palmares, dos plantares, cuatro electrodos inoxidables, cuatro rejillas de plástico, un cargador de batería y un manual de instrucciones.

IDROSTAR PRO tiene una garantía de 2 años para piezas y mano de obra.